


轻巧紧凑 强劲有力



NLX nano

牙科低压电动马达

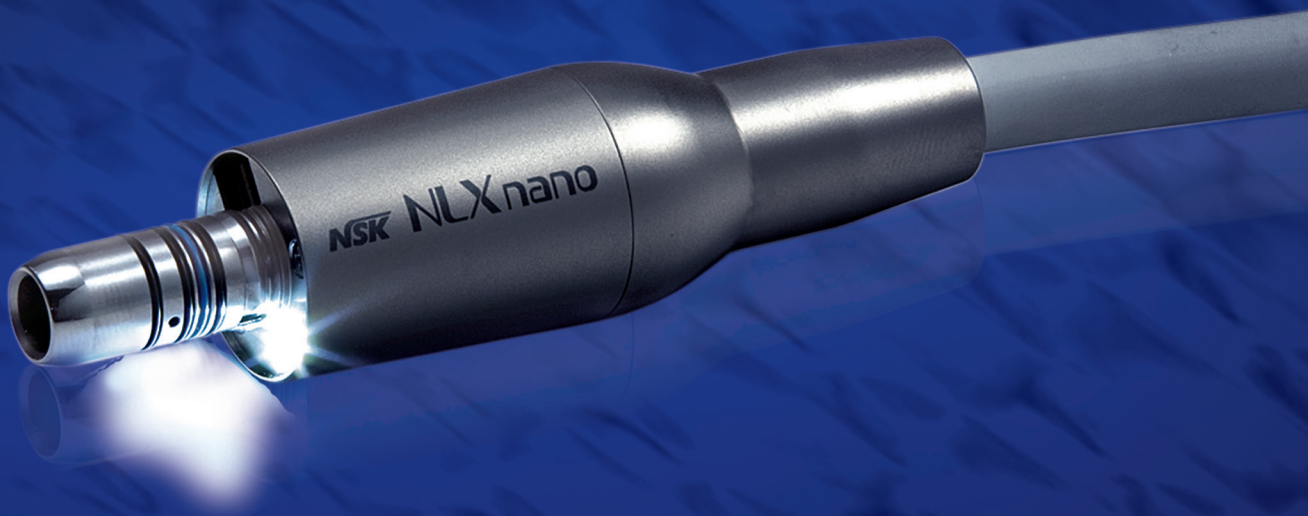

NLX nano

如气涡轮手机般良好平衡感的新一代电动马达

NSK 长年坚持不懈，致力于开发能与施术者手部融为一体的手术器械。今天，作为研究成果的集大成者—NLX nano 牙科低压电动马达终于诞生了。以往的牙科低压电动马达，与气涡轮手机相比，扭矩越大，重量越重，而且在安装弯手机后，存在长度过长，平衡性差这一较大缺点。NLX nano 牙科低压电动马达保留了以往的大扭矩的同时，彻底改进了这一缺点。小巧，轻便，并且实现了扭矩与重量的平衡。此外，采用了 LED 技术，可提供 32,000 LUX 的自然白光，为治疗部位提供更清晰的照明。



长度缩短 25%，重量减轻 20%

NSK 的牙科低压电动马达技术，在保持原牙科低压电动马达的大扭矩的同时，在小型化和轻量化上进行了大幅度的革新。



实现扭矩与重量的平衡

由于牙科低压电动马达长度大大缩短、重量明显减轻，因此，即使在安装了弯手机的状态下，仍能很好地实现握持的平衡。让医师治疗时的紧张压力和疲劳得以减轻，从而能更好地集中精力专注于治疗。另外，与气涡轮手机基本相同的长度，能够让医师以几乎同样的感觉进行治疗。



治疗范围更广

NLX nano 牙科低压电动马达，能够与医师已有的 E 型 * 带照明或者不带照明的弯手机连接使用。通过与各种不同的弯手机配合使用，实现 100-200,000 min⁻¹ 的大转速范围，从而能够适用于更广泛的治疗。

* 根据 ISO3964 标准

	100	1,000	2,000	2,500	10,000	40,000	200,000
Z10L 16:1		100-2,500 min ⁻¹					
Z25L 1:1				2,000-40,000 min ⁻¹			
Z95L 1:5						10,000-200,000 min ⁻¹	

NLX nano 外置式电动马达标准套

带光纤 无碳刷 内水道

型号: NLX nano 订货编号: Y1003539

配套内容:

- NLX nano U (控制组件)
- NLX nano (马达)
- NLX CD (马达线)
- NLAC (交流电变压器)

规格:

- 转速: 2,000-40,000 min⁻¹
- 扭矩: 3.4 Ncm
- 输入电压: AC 28 V 50/60 Hz
- 尺寸: W 127 x D 149 x H 54 mm
- 重量: 517 g

国械注进: 20212170072



生产企业/注册人

株式会社 中西 www.nsk-dental.com
邮编322-8666 日本国栃木县鹿沼市下日向700
电话: +81 289 64 3380 传真: +81 289 62 5636

NSK中国代理人 (NSK中国分公司)

上海舜速克国际贸易有限公司 www.nsk-shanghai.com
邮编200051 中国上海市长宁区紫云路421号SOHO天山广场T1-702室
电话: +86 21 6252 7272 传真: +86 21 6252 7855

产品的规格、式样发生变化时，恕不另行通知，敬请谅解。